

INFUSIONSTECHNIK

MONIDROP

Elektronisches Infusionskontrollgerät



*Mehr Sicherheit
in der Infusionstherapie*

MONIDROP

AMFUSION

Infusionstherapie – Sicherheit, Effizienz und Flexibilität

Eine präzise und kontrollierte Infusionstherapie verbessert die Sicherheit des Patienten signifikant.

Herausforderungen im Klinikalltag:

- Rollenklappen lassen sich nur schwer präzise dosieren.
- Das korrekte Einstellen handelsüblicher Rollenklappen benötigt Zeit und Ruhe.
- Manipulationen durch Patienten sind kaum zu identifizieren.
- Pflegekräfte bewegen sich schnell in einem rechtlichen Graubereich hinsichtlich der Durchführungsverantwortung.

Die Lösung: Das MONIDOR Konzept


Das Konzept umfasst das Monidrop-Gerät und den IV-Screen für die Echtzeitüberwachung der Infusionstherapie. Das System kombiniert eine präzise Steuerung mit digitaler Überwachung, um Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Sicherheit

- Präzise Einstellung der Infusionsgeschwindigkeit.
- Echtzeit-Überwachung im Kontrollraum oder auf einem mobilen Endgerät.
- Mehr Schutz auf Isolationsstationen durch bis zu 50% reduzierte Patientenkontakte.
- Automatische Erfassung und Dokumentation der Infusionsdaten.
- Akustische Störmeldung aktivierbar/deaktivierbar per Alarmtaste.

Effizienz

- Reduktion der Laufwege für das Pflegepersonal.
- Extrem einfache und intuitive Handhabung.
- Kosteneffiziente Lösung für Kliniken und Pflegeeinrichtungen.
- Wiederaufladbarer Akku mit Ladung im laufenden Betrieb.

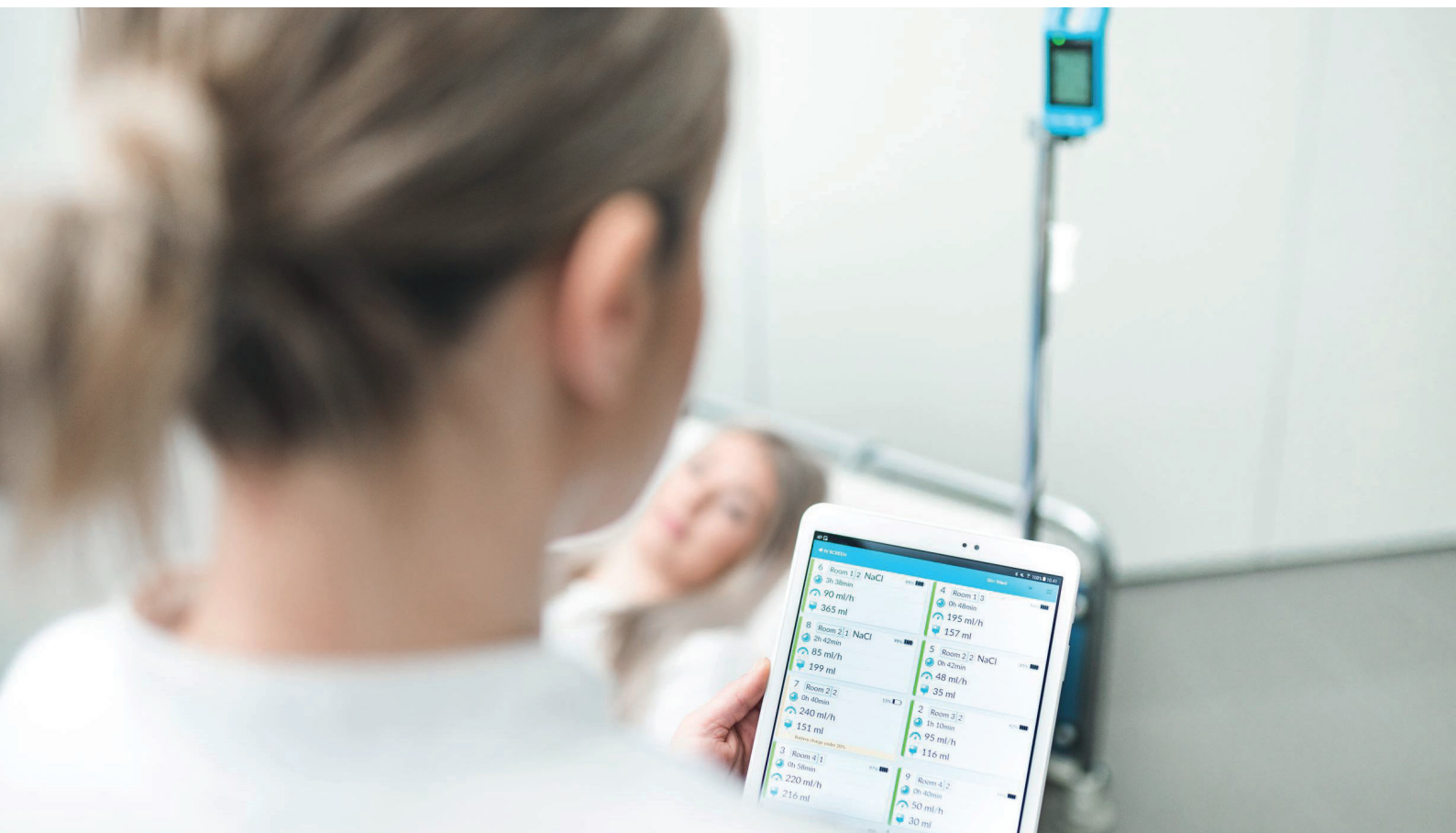



Flexibilität

- Nutzbar mit allen handelsüblichen Infusionssystemen.
- Optionale Zielwert-Definition für Gesamtvolumen und Dauer der Infusion.
- Erweiterbar mit Durchflussreglern.
- Kompatibel mit den meisten Schwerkraftsystemen.

Einfache Anwendung:

1. Monitor einschalten und an der Tropfkammer befestigen.
2. Infusionsrate über den Regler einstellen.
3. Gerät zeigt Durchflussgeschwindigkeit, Gesamtvolumen und Dauer an.
4. Automatische Übertragung der Daten an den IV-Screen.
5. Reinigen mittels Wischdesinfektion.
6. Abschalten durch Halten des Ein-/Ausschalters für drei Sekunden.

Erfahren Sie mehr! Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf unserer Webseite: amt-medica.com

Bestelldetails

Beschreibung	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
Monidrop W	cyan	Hardware	1	AMT3453
IV Screen		Software	1	AMTM1200
Monidrop Starting Kit		Hardware	1	AMTM11START



zur digitalen Version der Broschüre



weitere AMT Medica Produkte



Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com